Modelo No.	MA-54380V
Longitud total	2,200mm (con extensión: 2,300mm)
Ancho Total	990mm
Altura Total	775 a 1,125mm
Altura a la base del colchón*1	370 a 720mm
Colchón	2,000 x 860mm
Carga de trabajo segura*2	230kgf (2,250N)
Ruedas*3	150mm dia. de una sola rueda con sistema de freno centralizado
Ángulo de respaldo	0° a 70°
Ángulo de rodillas	0° a 25°
Trendelenburg/ Trendelenburg Inverso	0° a 12°
Rayos X	Opcional

CE

*1 Indica la altura desde el suelo hasta la superficie de la base del colchón.
*2 Máxima carga con la que la cama puede ser operada.
(La carga total del peso del usuario y artículos adicionales incluyendo el colchón y accesorios.)
*3 Dos de las ruedas son anti-estáticas.

Ruedas de 125mm de diámetro y pedales en las cuatro esquinas también disponibles, para más información pregunte a Paramount Bed o a su distribuidor.


Colchones:

- A prueba de agua
- Retardante al fuego
- Tratamiento antibacterial
- Antiestático*
- Fácil limpieza
- Reduce/dispersa la presión

*Solo modelos señalados

Modelo No.	ME-025631* / ME-025641*	ME-025672*	ME-031611	CE-025651E	CE-025341E
Longitud	2,000mm				
Ancho	860mm				
Espesor	150mm				100mm
Núcleo	Poliuretano y Memory	Viscool	Espuma de uretano		


Colchón Estándar
ME-025631

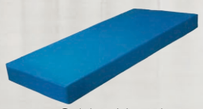

Colchón Viscoelástico
ME-025672


Colchón de Evacuación
ME-031611


Colchón Estándar
CE-025651E

Accesorios adicionales:

- Mesa Monitor (CF-051E)
- Luz de pies (MC-5037)
- Extensión de colchón (CE-025651E-YE / CE-025341-YE)
- Otros artículos como se muestra abajo.

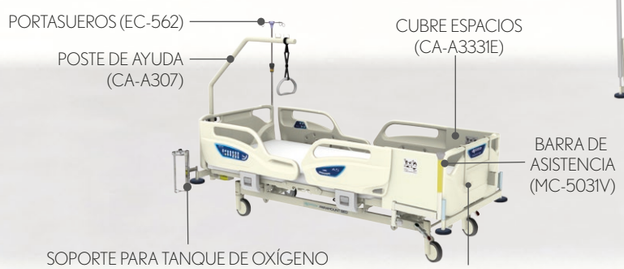




MARCO ORTOPÉDICO (KA-86)*3 Y PIEZAS DE FIJACIÓN PARA EL MARCO ORTOPÉDICO KA-86 (CA-A343E)

PARAMOUNT BED MÉXICO S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 664, Interior 2A, Col. Del Valle Centro,
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México.
Tel: +52 55 8310 1002 | www.paramountbed.com.mx

as human, for human
PARAMOUNT BED






Serie A5

Cama Eléctrica

para un
ambiente de
recuperación más seguro

Para el camino de la recuperación.


Los pacientes requieren de un ambiente nutritivo donde puedan recuperarse con tranquilidad. Poniendo especial énfasis en la seguridad, la serie A5 de Paramount Bed está diseñada para mitigar los accidentes. Además de la seguridad, las camas también están diseñadas para un fácil uso, una fácil limpieza y un fácil mantenimiento.

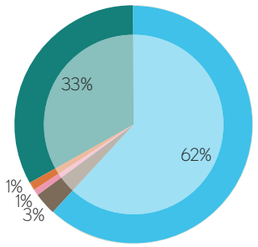

Accidentes durante el cuidado médico

- **Caídas**
- Aspiración accidental
- Ingestión accidental
- Desafío de la orden de reposo de cama
- Otros


2013, Análisis de datos sobre accidentes del Consejo Japonés para el cuidado de la salud.

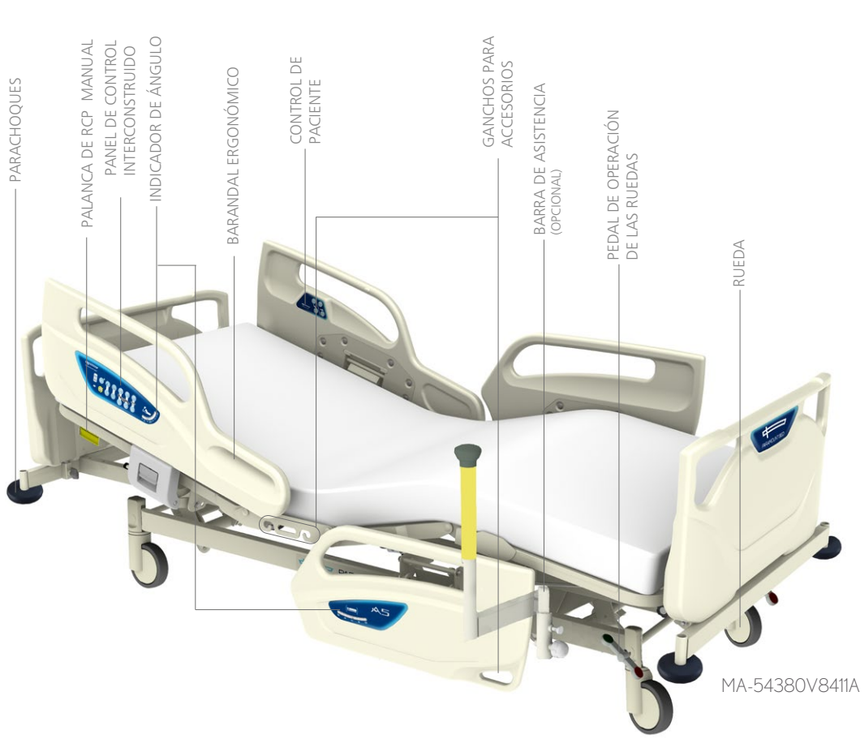



Diseño compacto

Además de proveer un espacio confortable para el descanso de los pacientes, el diseño compacto del ancho total de la cama da mayor facilidad al maniobrar alrededor de esquinas agudas, entradas estrechas y elevadores. Como parte de su diseño compacto, espacios entre la cama y sus componentes fueron reducidos. Esto permite al personal médico colocar una camilla muy cerca junto a la cama para una transferencia de paciente fácil y rápida.

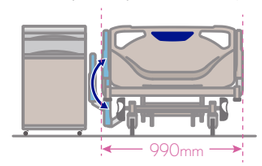

Prevención de caídas

Altura mínima de 370mm*

Una baja altura de 370mm* asegura que los pacientes puedan colocar firmemente sus talones en el suelo mientras que el diseño ergonómico de los barandales provee a los pacientes un soporte adicional cuando se levantan.

*Altura del suelo a la superficie de la base del colchón



Seguridad en el diseño

La serie A5 de Paramount Bed cumple ampliamente con la norma IEC 60601-2-52 a través de su resistente estructura y características de seguridad. Para una mejor atención, las camas adoptan un diseño sin espacio entre sus componentes para reducir atrapamientos.

Saliendo de la cama (Barra de asistencia)


La cama cuenta con una barra de asistencia diseñada para dar un buen soporte al paciente, estrategicamente localizada para un mejor apoyo al momento de levantarse, reduciendo así la carga sobre el personal médico.



Fácil de usar

Botón de RCP eléctrico y palanca de RCP manual

Regresa rápidamente la sección de respaldo a una posición horizontal para llevar a cabo el procedimiento de RCP.

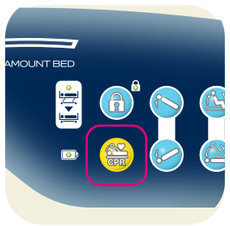

Botón de RCP eléctrico



Palanca de RCP manual

Indicador de mínima altura

• Un indicador LED de color naranja en el panel de control interconstruido en barandales encenderá cuando la cama no se encuentre en su mínima altura. Por otro lado, la ausencia de ésta luz, indicará que la cama se encuentra en su posición más baja. La luz LED puede verse rápidamente incluso desde la entrada de la sala, lo que resulta ser útil cuando el personal médico realiza sus recorridos nocturnos.



Control de movimientos

Los paneles interconstruidos en barandales se encuentran convenientemente en ambos lados de la cama, lo que permite al personal médico comprobar fácilmente la expresión del paciente, el goteo IV, y monitores durante la operación de la cama. El bloqueo de funciones * se incluye para evitar que cualquier botón se presione accidentalmente.





Panel de control de paciente & Panel interconstruido en barandales


*Los botones eléctricos de RCP permanecen activos

Bloqueo anti-manipulación

• Esta característica de seguridad mantiene al paciente dentro de la cama al evitar la liberación accidental de los barandales cuando el paciente está recargado sobre ellos y evita que el paciente caiga cuando intenta bajar los barandales por sí mismo.

Ganchos para accesorios

El personal médico puede encontrar los ganchos para accesorios en ambos lados de la cama en la base de la sección cadera y barandales, en los cuales pueden colgarse artículos como lo son las bolsas de orina. Dependiendo de la condición del paciente, los ganchos para accesorios también pueden utilizarse para colgar otros artículos.

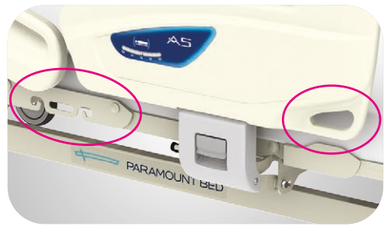



Agujero de montaje para bolsa de orina o cinturón de sujeción



Sujetador de accesorios

Este documento es PROPIEDAD EXCLUSIVA de Paramount Bed. Se prohíbe su transmisión, redistribución o reproducción en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopias, grabaciones o de cualquier otra manera, sin el previo consentimiento por escrito de Paramount Bed