as human, for human
PARAMOUNT BED

PARAMOUNT BED MÉXICO S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma 250, Piso 8, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México
C.P. 06600 Tel: +52 (55) 3600 7145
http://www.paramountbed.com.mx

Este documento es PROPIEDAD EXCLUSIVA de Paramount Bed.
Se prohíbe su transmisión, redistribución o reproducción en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopias, grabaciones o de cualquier otra manera, sin el previo consentimiento por escrito de Paramount Bed.

Diseño y especificaciones pueden variar sin previo aviso. Todas las imágenes del producto, componentes y accesorios pueden no reflejarse en el producto final. Las imágenes pueden reflejar equipo opcional y están sujetas a cambio sin previo aviso. Toda la información presentada en esta base, información actual o metas de diseño disponibles al momento de presentarlas pueden variar sin previo aviso. Algún equipamiento o características pueden no estar disponibles. Resultados actuales, desempeño y otras especificaciones pueden variar dependiendo del modelo en producción y puede depender del modelo seleccionado y sus accesorios.

L171-1614-SP01



as human, for human
PARAMOUNT BED



VitalGo Total Lift Bed™

cama multi-functional

Movilidad temprana y verticalización de paciente al alcance de un botón



La cama para los que desean una estable y pronta recuperación del paciente

Estudios recientes alrededor del mundo continúan demostrando que los programas de movilidad temprana para pacientes, pueden mejorar sustancialmente sus vidas, no solo físicamente, sino también mentalmente. Con esta cama, muchas de las barreras que antes impedían que el paciente tuviera movimiento, han sido eliminadas, y la recuperación del paciente en la UCI puede convertirse en un proceso mucho más seguro y estable, motivando tanto al paciente como al personal médico y de cuidado de la salud.

“Una Postura Vertical es la Mejor Medicina”

Estamos aprendiendo rápidamente que tener una postura vertical es muy beneficiosa para los pacientes.
La participación temprana y ejercicio frequente varias veces al día, es mucho mejor que solo uno hora sólida de ejercicio.
Nuestro cerebro se vuelve más actvivo, así como nuestro corazón, articulaciones, piel, músculos y metabolismo. La tecnología de la cama Total Lift (Elevación Total) puede ayudar a los pacientes a lograr esto de forma más segura y con menos esfuerzo y ayuda, que los métodos utilizados anteriormente.

Movilidad Vertical Progresiva









La innovadora Cama de Elevación Total puede inclinarse hasta 82°, y es capaz de detenerse en cualquier ángulo intermedio. Esto le da al paciente el beneficio de poder estar en posición vertical cuando esté listo, mientras da pasos pequeños para alcanzar el objetivo.

Rehabilitación en la Cama

Una variedad de ejercicios de rehabilitación en posición vertical pueden llevarse a cabo en la cama, como sentadillas, marcha en el lugar y comunicación a nivel de los ojos. Lo que cada paciente necesita en cada etapa puede ser fácilmente evaluado y provisto. Un sistema de correas flexibles, ayuda a asegurar al paciente en posición durante el movimiento y elevación de la cama. El material es cómodo y puede lavarse y/o desecharse entre pacientes.




Weight Bearing Control System™ (Sistema de control de soporte de peso)

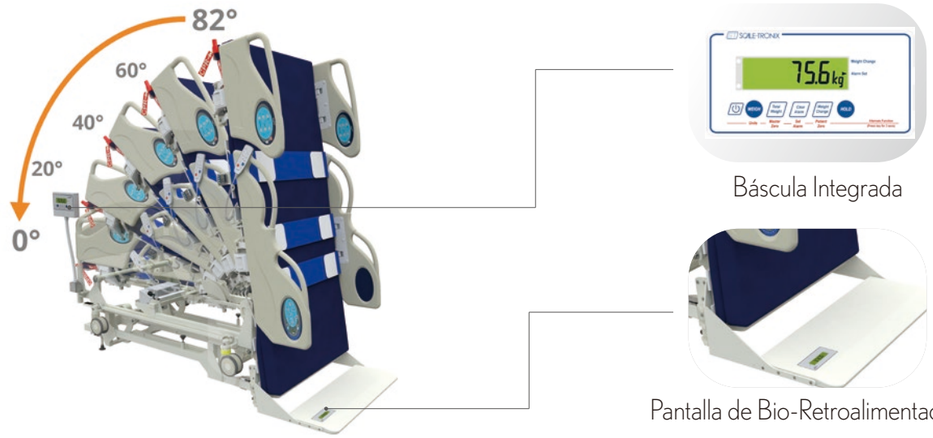

Ahora puede observar la movilidad vertical progresiva como nunca antes. A medida que la cama se inclina, el Foot Lifter ™ mide el peso soportado por el paciente, mientras que la báscula integrada muestra el porcentaje de la distribución del peso. Con este sistema, los profesionales de la salud pueden controlar qué tanto peso soporta el paciente y qué tanto se debe inclinar la cama, avanzando activamente a niveles más altos de movilidad. Estableciendo metas en común con el equipo médico, el paciente y su familia estarán motivados y les permitirá disfrutar el proceso de recuperación activa.

Al alcance de un botón



La rehabilitación no tiene que ser solo una hora al día ¿El paciente realmente tiene que recostarse y esperar las otras 23 horas? Ahora, con solo presionar un botón, los pacientes pueden experimentar movilidad en cualquier momento del día con solo 1 ó 2 cuidadores al pendiente de ellos, al mismo tiempo que se minimiza el riesgo de lesiones tanto para el personal médico y de cuidado de la salud como para los propios pacientes.

Foot Lifter™ (piecera ajustable)



El patentado Foot lifter ™ se mueve eléctricamente en un rango de 30cm. Este evita que el paciente se deslice hacia abajo durante la elevación total de la cama o en la posición de silla. También proporciona un soporte de peso, estimulación y aporte sensorial muy necesarios para la parte inferior de los pies y la parte inferior de las piernas.

Egreso Frontal de Pie

Cuando el paciente esta listo para caminar, el proceso de salida de la cama es accesible. La posición vertical de la cama lleva al paciente a una posición de pie sin curvar la columna vertical o las caderas, y se encuentra al nivel del piso, de esta manera ellos pueden fácilmente dar sus primeros pasos fuera de la cama .





Características Destacadas del Producto



Controles de Operación


- Controles del Barandal
  Colocados en los barandales a un costado de la cabecera.
- Control de mano alámbrico.
- Funciones adicionales como la Elevación Total de la cama, mover el Foot Lifter ™, etc., se manejan con el control de mano alámbrico, permitiendo a los cuidadores moverse alrededor de la cama mientras trabajan con el paciente.

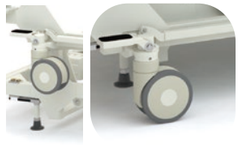

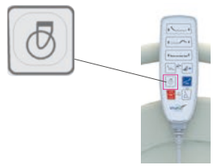

Smart Break™ (Freno Inteligente) & Características de las Ruedas

Las ruedas se separan del piso (se elevan) cuando no están en la posición "Ruedas". Presionando el botón "Ruedas", la cama desciende y las ruedas vuelven a tocar el suelo. Al oprimir cualquier otro botón excepto subir/bajar respaldo, las ruedas se elevaran automáticamente.

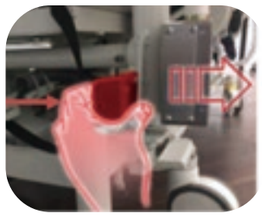

Liberación manual y rápida de posición de inclinación


En caso de que el paciente deba descender rápidamente de la posición de inclinación (Elevación Total), jalar la palanca roja en la cabecera, liberará la posición y regresará la cama a posición horizontal.



Sístema de Colchón LAL/ AP

Cuenta con un sistema de colchón integral de Baja Pérdida de Aire (LAL)/Presión Alterna (AP) , tiene el compresor integrado en el marco de la cama, y el panel de control se ubica en el barandal derecho a un costado de la piecera.

General

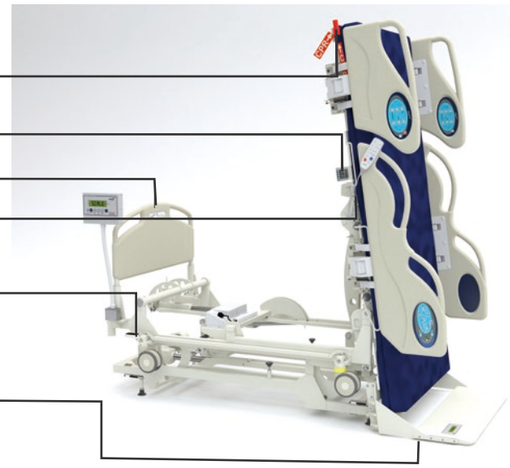

	Nombre del Producto	VitalGo Total Lift Bed
	Modelo No.	VG-TLB425T
Longitud Total	Normal	2,180mm
	Contraído	1,980mm
	Extendido	2,280mm
Ancho Total		1,040mm
Altura Total (sin Colchón)*		460 a 750mm
Tamaño del Colchón**		2,000 x 910 x 178 (mm)
Carga de Trabajo Segura***		280kg
Peso Máximo del Paciente		193kg
Tamaño de las Ruedas		127mm
Ángulo de Ajuste del Respaldo		63°
Ángulo de Ajuste de Rodillas		25°
Batería		Sí

CE FDA

* Indica la altura del piso hasta la superficie de la base del colchón


** Cuando se utiliza un sistema de Colchón de Baja Pérdida de Aire

*** Carga máxima con la que se puede operar la cama.
(La carga total del peso del usuario y los elementos secundarios, incluyendo el colchón y accesorios.)

Otras Posiciones de la Cama



Posición de Silla

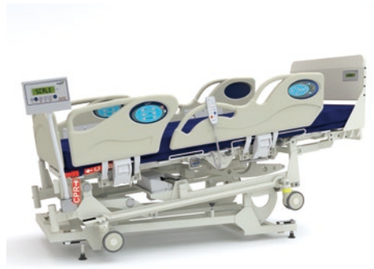

Posición de Trendelenburg

Accesorios Adicionales





CABECERA CON BARRAS DE SOPORTE PARA FACILITAR TRANSPORTE

*El soporte para tanque de oxígeno y el colchón de espuma (TLB425-MAT-FIM) también están disponibles. Para más información, favor de contactar a Paramount Bed o a su distribuidor.